


Mobilo



Kórház | Ápolás | Otthonápolás | Támogatás

A modern
betegszállító kocsi
minden osztályra



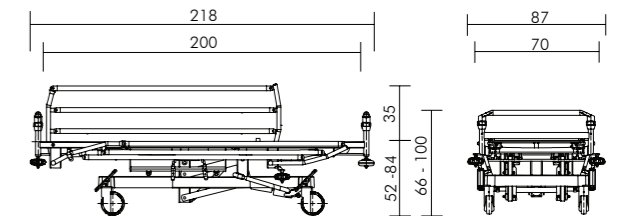

Mobilo - több, mint ami elvárható

A Mobilo betegszállító kocsit többféle célra is használható a felépítésének köszönhetően. Először is a páciensek szállításában nyújt nagy segítséget. Mivel a Mobilo a legújabb DIN EN 60601-2-52 szabványok is megfelel ágyként is használható az egy napos kórházi beavatkozásoknál. Az átfektetések csökkentése a páciensek és az ápoló személyzet számára is sok előnnyel jár. A páciensek, állapottól függően hosszabb időt is eltölthetnek őrés nélkül a betegszállító kocsin.

A Mobilo betegszállító kocsit használata az ápolók munkáját is megkönnyíti. A központi fékrendszer a kocsit mind a négy sarkáról működtethető, az irányított futás funkció segítségével a Mobil kocsit egyedül is könnyű irányítani.

A Mobilo betegszállító kocsiként és ágyként is magas kényelmet és biztonságot kínál. A mind-két oldalon lehajtható oldalrács 37 cm-es védőmagasságot biztosít.



1.



2.




3.




4.



1.

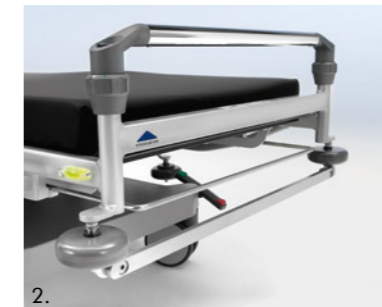

2.

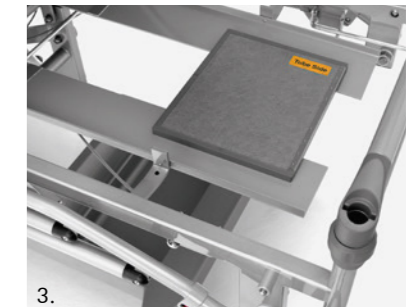

3.

Biztonság és kényelem

A Mobilo betegszállító kocsit 2 és 4 részes fekvőfelülettel is rendelhető. A fekvőfelület mérete 200 x 70 cm. A fekvőfelület magasságát és helyzetét a kocsit mindkét oldaláról be lehet állítani - vízszintes helyzetből kényelmes ülőhelyzetbe (1. kép).

A lehajtható oldalrácsok nagy biztonságot nyújtanak a páciens számára (2. kép). Az ápoló személyzet munkáját is megkönnyíti, hogy a páciens nem szorul folyamatos felügyeletre.

Lámpedál segítségével a fekvőfelület magassága 47 és 79 cm között beállítható (3. kép).

A páciensek biztonságos magasságban tudják elhagyni a kocsit és az ápolószemélyzet is ergonomikus magasságban tud dolgozni.

Vészhelyzet esetén a Mobilo betegszállító kocsit könnyen és egyszerűen Trendelenburg pozíció állítható (4. kép).

Az opcionálisan rendelhető újraélesztésnél segítséget nyújtó támaszt a betegszállító kocsit hátrésze alá lehet lehajtani. A támasz stabilabb, rázkódásmentes felületet biztosít az újraélesztés közben.

Hasznos kiegészítők


A Mobilo betegszállító kocsit minden helyzetben megállítja a helyét, a különböző kiegészítőknek köszönhetően.

A széles és ergonomikus tolófogantyúk megkönnyítik a betegszállító kocsit irányítását. A tolófogantyúkat a kocsit a fej- és lábvégnél is el lehet helyezni (fent, nagy kép).

A papírtörölköző tartót a betegszállító kocsit fej- és lábvégnél is el lehet helyezni (1. kép).

A Mobilo betegszállító kocsit beépített medikai sínnyel rendelkezik, melyre a különböző eszközök (pl. pumpák vagy lélegeztetőgép) felakaszthatók (2. kép).

A Mobilo hátrésze alá opcionálisan röntgenkassetta tartó (3. kép) is rendelhető, így átfektetés nélkül megoldható a röntgenfelvételek elkészítése.

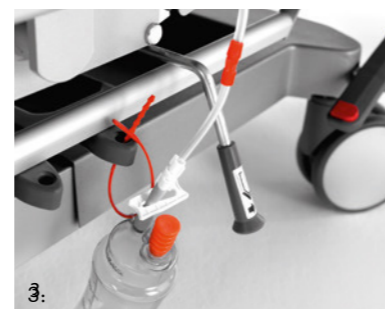

Ápolás minden helyzetben

Minden az ápoláshoz és az ellátáshoz szükséges eszköz könnyen és biztonságosan a Mobilo betegszállító kocsira helyezhető.

Az etetőtálca könnyen a kocsira helyezhető, így a beteget átfektetés nélkül lehet ellátni (fent, nagy kép).

A teleszkópos infúziós állványt a betegszállító kocsira mind a négy sarkán el lehet helyezni (1. kép).

A betegszállító kocsira oxigén palack helyezhető el, amit tépőzáras hevederrel lehet rögzíteni. A beteg személyes tárgyainak is jut itt hely (2. kép).

A szerelék tartó sín segítségével további ápoláshoz szükséges eszközök helyezhetők el a betegszállító kocsira mindkét oldalán (3. kép).

Technikai adatok

Mobilo	
Méretetek és súly	
Külső méretek	218.5 x 87 cm
Fekvőfelület mérete	200 x 70 cm
Matrac vastagsága	10 cm
Biztonságos terhelhetőség	200 kg
Maximális emelési kapacitás	250 kg
Térköz a betegszállító kocsira alatt (legalsó pozícióban)	9 cm
Önsúly	130 kg
Fekvőfelület felosztása (2 részre osztott fekvőfelület)	74 cm - 117.5 cm
Fekvőfelület felosztása (4 részre osztott fekvőfelület)	74 cm - 13 cm - 37.7 cm - 61.8 cm
Oldalrácok védőmagassága	37 cm
Beállítási lehetőségek	
Fekvőfelület magassága	52 - 84 cm
Hátrész	0° - 70° között
Combrész (4 részes fekvőfelület esetén)	0° - 45° között
Trendelenburg és Anti-Trendelenburg pozíció	+/- 0° - 14° között
Felszereltség és opciók	
Oldalrácok	Biztonsági oldalrácok mindkét oldalon ●
Alapszín	Ezüstszürke (RAL 9006-hoz hasonló) ●
	Kristályfehér (NCS S0500N) ○
Fekvőfelület	4 részre osztott fekvőfelület ●
	2 részre osztott fekvőfelület ○
Fali ütközőgörgők	6 vízszintes csillapító fali ütközőgörgő ●
	6 fali ütközőgörgő, 2 univerzális csillapítással ○
	6 univerzális fali ütközőgörgő ○
Kerekek központiférendszerrel, három állású fékpedállal	Dupla, Ø 150 mm-es kerekek ●
	Integral Ø 200 mm-es kerekek ○
Iránytartó kerék	Fejvégen, jobb oldalon ●
	Fejvégen, bal oldalon ○
	Lábvégén, jobb oldalon ○
	Lábvégén, bal oldalon ○
Konduktív kerék	1 kerék ●
	2 kerék ○
	4 kerék ○
Tartozékok	Etetőtálca ○
	Röntgenkazetta tartó a fekvőfelület alatt ○
	Oldalrác védőhuzat ○
	Krómozott tolófogantyú pár ○
	Monitortartó polc ○

● = alapfelszereltség ○ = opció

Fekvőfelület

2 vagy 4 részes fekvőfelület (HPL anyagból)

Tartozék rögzítési pontok

- A fej- és lábrészénél két helyen lehet az infúziós állványt rögzíteni
- Szerelék tartó sín a fekvőfelület alatt, mindkét oldalon, univerzális tartókkal

Fej- és lábvég

- Leszerelhető, krómozott tolórudak
- Infúziós állvány rögzítési pontok

Felhasznált anyagok

- Alváz és fekvőfelület: Hegesztett acél váz, porfestéssel
- Fekvőfelület: HPL lapok
- Tolórudak: Poliamid 6, POM, rozsdamentes acél

Védelem

- 6 fali ütközőgörgő (vízszintes vagy univerzális csillapítás)
- Oldalvédelem az oldalrácokba építve

Az Ön ágya - a mi szenvedélyünk.

A technikai változtatás jogát fenntartjuk! Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget!

Gyártó:

Joh. Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42, 32051 Herford, Németország
Tel.: +49 (0) 52 21/185-0
Fax: +49 (0) 52 21/185-252
E-mail: info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

Magyarországi forgalmazó:

Pro Klinimed XXI Kft.
2023 Dunabogdány, Erzsébet királyné u. 31.
Tel.: +36 26 390 441
Fax: +36 26 390 476
E-mail: info@pro-klinimed.hu
www.pro-klinimed.hu


STIEGLMEYER