

Junior



Kórház | Ápolás | Otthonápolás | Támogatás



A különleges elvárásoknak is megfelelő
kórházi gyerekágy




Biztonságos és megbízható

A Junior kórházi gyerekágyat a különösen biztonságos és megbízható tulajdonságai különböztetik meg a többi gyerekágytól. Az ágy praktikus funkciói megkönnyítik az ápolószemélyzet napi munkáját.

Az ágy erős, magas minőségű kialakítása miatt egyszerre biztonságos benne aludni és napközben játszani. Az ágy vidám színei miatt a gyerekek könnyebben fogadják el az ágyat és ezzel egyidőben javítják a vizuális észlelést.

Az ágyat kisgyermekek használhatják 100 cm-es magasságig. Az gyerekágy biztonságos terhelhetősége 50 kg.

A legújabb szabványoknak is megfelelő konstrukció biztosítja, hogy az ágy hosszú éveken át fog stabil és megbízható szolgálatot teljesíteni.

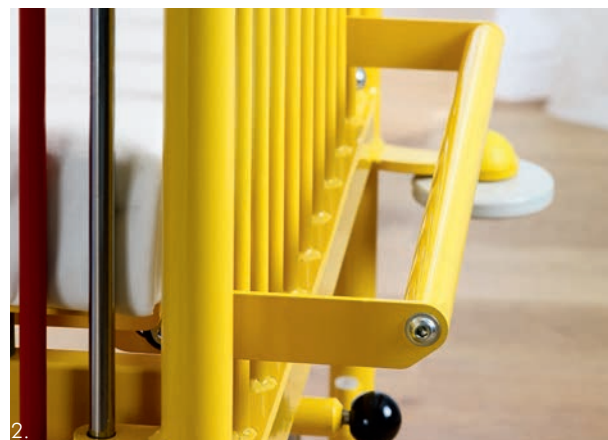

Ergonómikus ápolás

A fekvőfelület magasságát 75 és 91 cm között lehet beállítani. Így biztosítható, hogy a testtartásnak ergonómiailag megfelelő magasságba lehessen állítani az ágyat. Ez az ápolószemélyzet és a hozzátartozók számára is nagyobb kényelmet jelent. Egy könnyen oldható állítókarral segítségével lehet az ágyat többféle magasságra beállítani (1. és 2. kép).

A fekvőfelület magasságállítás mellett kézzel egy max. 7°-os Trendelenburg / Anti-Trendelenburg pozíció is beállítható (nagy kép). Ezzel a tulajdonsággal az gyermekágy ideális megoldást nyújt a fiatal páciensek kezeléséhez.



Biztonság és védelem

A könnyen működtethető biztonsági oldalrácsok gyors hozzáférést biztosítanak a pácienshez (2. kép). 81 cm-es magasságával olyan gyerekek számára is védelmet nyújt, akik már önállóan is fel tudnak állni (2. kép).

Az oldalrácsokat köztes pozícióba is lehet állítani, hogy a szükséges ápolási teendők könnyen elvégezhetőek legyenek.



Az oldalrácsok oldóretesze úgy lett kialakítva, hogy csak az ágyon kívülről lehessen használni (1. kép). Ezzel meggátolható, hogy az ágyban tartózkodó engedje le az oldalrácsot. Így elkerülhetőek a kiesésből származó balesetek.



Felszereltség és opciók

	Junior
Méretetek és súly	
Külső méretek	80 x 167 cm
Fekvőfelület mérete	69 x 135 cm
Fekvőfelület magassága	75 - 91 cm között
Az ágy magassága	170,1 cm
Biztonságos terhelhetőség	50 kg
Ágy alatti rész	66 cm (az oldalrács legmagasabb pozíciójában)
	16 cm (az oldalrács legalacsonyabb pozíciójában)
Önsúly	77 + 5 = 82 kg (ágy + tartozékok)
Oldalrács védőmagassága	max. 81 cm
Beállítási lehetőségek	
Trendelenburg pozíció	7°
Anti-trendelenburg pozíció	7°
Fekvőfelület magassága	75 - 91 cm
	A magasság és a Trendelenburg pozíció retesz segítségével állítható
Anyagok	
	Hegesztett acél konstrukció tartós poliészter porfestéssel
Kiegészítők és tartozékok	
	Kihúzható szennyesartó
	Pelenkagyűjtő
	Infúziós állvány tartó

Tartozékok: praktikus, letisztult, rugalmas

A gyerekágy további hasznos kiegészítőkkel szerelhető fel. Ezek a tartozékok úgy szerelhetők fel az ágyra, hogy mármikor gyorsan és könnyen elérhetőek legyenek. Ezek a tartozékok a kihúzható ágynemű tartó, használt pelenka tartó és infúziós állvány tartó. Az ágynemű tartó megkönnyíti az ápoló személyzet és család munkáját. A ruhaváltás vagy az ágynemű csere során a

ágyneműtartóban tiszta vagy szennyes ruhát is tárolhat (2. kép). A pelenkatartóban higiénikusan tárolhatja a használt pelenkákat (1. kép). Az infúziótartók biztosítják, hogy a fiatal páciensek az ágyban is megkaphassák az infúziót (nagy kép).

Alapszín
ágyvégek, hosszanti oldal, fogantyúk, infúzió tartó

Kristályfehér NCS 0500-N	Ezüstsürke
Taxi sárga RAL 1023	Kék RAL 5015

Másodlagos szín
oldalrácsok, fekvőfelület, magasságállítás fogantyú, szennyesartó vezetősín, hátrész

Kristályfehér NCS 0500-N	Ezüstsürke
Taxi sárga RAL 1023	



A technikai változtatás jogát fenntartjuk! Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget!

Gyártó:

Joh. Stiegemeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42, 32051 Herford, Németország
Tel.: +49 (0) 52 21/185-0
Fax: +49 (0) 52 21/185-252
E-mail: info@stiegemeyer.com
www.stiegemeyer.com

Magyarországi forgalmazó:

Pro Klinimed XXI Kft.
2023 Dunabogdány, Erzsébet királyné u. 31.
Tel.: +36 26 390 441
Fax: +36 26 390 476
E-mail: info@pro-klinimed.hu
www.pro-klinimed.hu

